



umano medical

SÉRIE THÉRAPEUTIQUE

airnest orange HYBRID^{MC}



**Prévention/traitement des plaies de pression • Redistribution de la pression •
Système convertible pour une flexibilité de traitement**

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Redistribution de la pression non motorisée avec la possibilité de convertir en une surface motorisée et d'offrir les thérapies supplémentaires d'alternance de pression et faible perte d'air.

THÉRAPIE NON MOTORISÉE

- SAT (self-adjusting technology™)
Technologie auto ajustable de la pression d'air interne en fonction des mouvements ou des déplacements du patient.

THÉRAPIES MOTORISÉES

- Faible perte d'air sur demande
- Alternance de pression
- Mode statique



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CELLULES D'AIR/MOUSSE

Offre redistribution de la pression et confort au patient.

UNITÉ DE CONTRÔLE (optionnelle)

Le panneau de commande intuitif permet au personnel de régler rapidement le poids du patient, de sélectionner les thérapies souhaitées et de déterminer le temps du cycle d'AP.

HOUSSE DU DESSUS

La housse est hautement perméable à la vapeur, minimise la friction et le cisaillement, et est disponible en nylon ou en polyuréthane extensible.

HOUSSE SUPÉRIEURE


Housse supérieure à trois couches, perméable à la vapeur pour une thérapie de faible perte d'air optimale

CELLULES D'AIR/MOUSSE

3 zones avec IFD (indice de compression) variables

UNITÉ DE CONTRÔLE

Fiable, facile d'utilisation et silencieuse

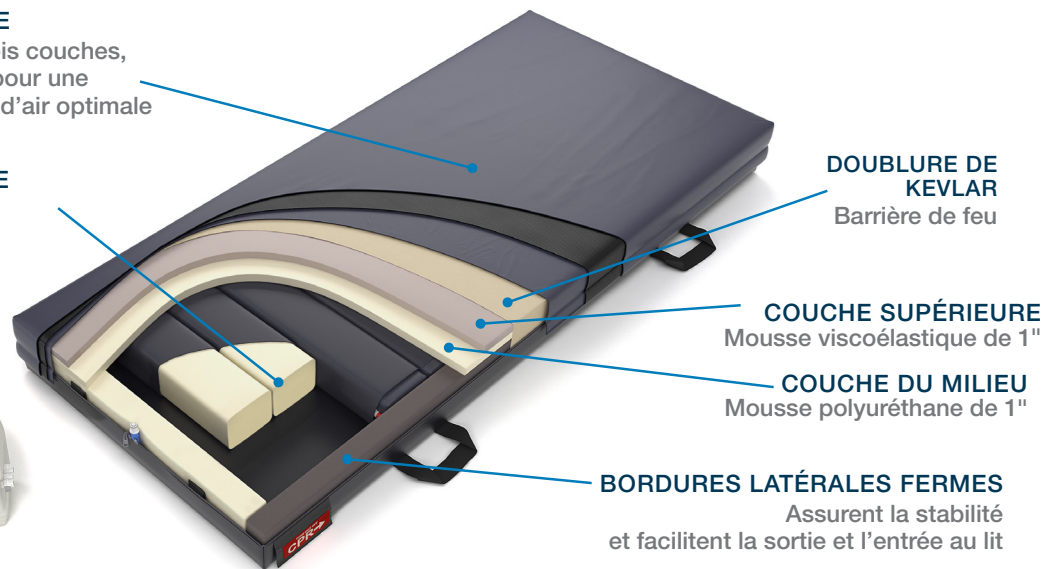

DOUBLURE DE KEVLAR
Barrière de feu

COUCHE SUPÉRIEURE
Mousse viscoélastique de 1"

COUCHE DU MILIEU
Mousse polyuréthane de 1"

BORDURES LATÉRALES FERMES
Assurent la stabilité et facilitent la sortie et l'entrée au lit

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions	88,9 cm l X 203 cm ou 213 cm L X 17,8 cm H (35" l x 80" ou 84" L x 7" H)	
Capacité de poids	500 lb (227 kg)	
Poids du matelas	43,5 lb (19,7 kg)	
Unité de contrôle	Dimensions	35 cm x 28 cm x 16,4 cm (13,8" x 11" x 6,5")
	Poids	10,2 lb (4,6 kg)
	Cycle	Cycle d'alternance de pression ajustable : 5,10,15 et 20 minutes
	Fiche	14' de qualité hôpital, détachable
	Alimentation Électrique	90-264 V, 50/60 Hz, 1A/0,5A, Universel
	Listé ETL	Conforme à la norme UL STD 60601-1 pour la sécurité aux risques électriques, de feux et mécaniques.
Certifié selon	CAN/CSA STD C22.2 No. 601.1	
Inflammabilité	Rencontre les normes CAL 117, CAL 129, 16 CFR 1632, & 16 CFR 1633	

Les spécifications peuvent changer sans préavis.



Umano Medical inc.
230, boul. Nilus-Leclerc
L'Islet QC G0R 2C0 CANADA
Sans frais : 1 877 247-7494
information@umanomedical.com
umanomedical.com

Umano Medical est distributeur de la série thérapeutique fabriquée par KAP MEDICAL