



umano medical

SÉRIE CONFORT

comfortnest blue^{MC}



Redistribution de la pression • Confort • Durabilité


PRINCIPAUX AVANTAGES

- Conception 2 couches / 2 zones offrant une redistribution de la pression et du confort
- Section talon avec mousse à faible IFD offre une redistribution de la pression optimale pour cette zone à haut risque
- L'intérieur du matelas est entièrement fabriqué de mousse de qualité médicale, 100 % non allergène
- Toutes les composantes sont antimicrobiennes aidant à empêcher la croissance de bactéries et de moisissures
- La conception de la housse comprend des coutures pliées en double avec 4 poignées renforcées
- Capacité de poids de 450 lb
- Modèle **comfortnest blue+**: mousse Haute Résilience (HR) et capacité de poids de 950 lb

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

OPTIONS DE HOUSSE

- Polyuréthane extensible dans 4 sens
- Nylon 70 D

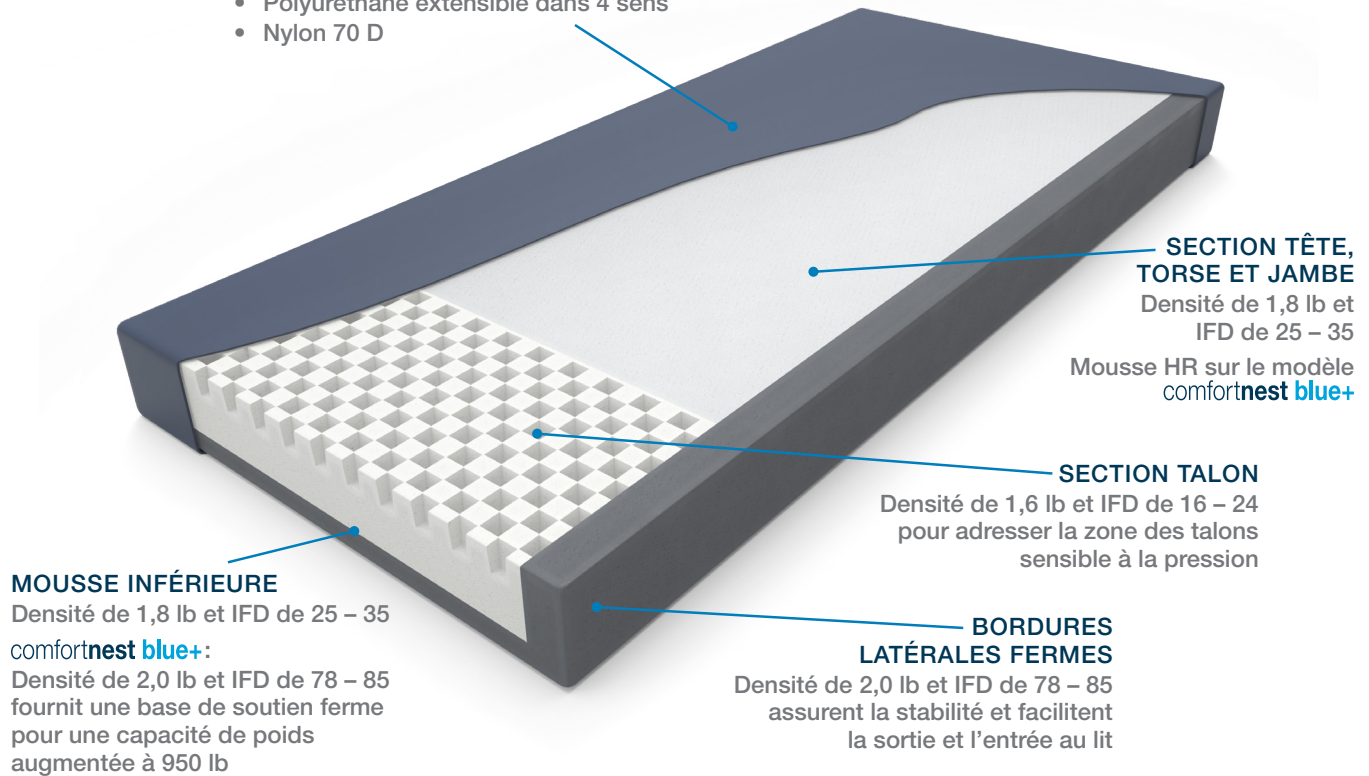

SECTION TÊTE, TORSE ET JAMBE

Densité de 1,8 lb et IFD de 25 – 35

Mousse HR sur le modèle **comfortnest blue+**

SECTION TALON

Densité de 1,6 lb et IFD de 16 – 24 pour adresser la zone des talons sensible à la pression

BORDURES

LATÉRALES FERMES

Densité de 2,0 lb et IFD de 78 – 85 assurent la stabilité et facilitent la sortie et l'entrée au lit

MOUSSE INFÉRIEURE

Densité de 1,8 lb et IFD de 25 – 35

comfortnest blue+:

Densité de 2,0 lb et IFD de 78 – 85

fournit une base de soutien ferme

pour une capacité de poids

augmentée à 950 lb

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions	88,9 cm l x 203,2 cm ou 213,4 cm L x 15,2 cm H (35" l x 80" ou 84" L x 6" H) Dimensions personnalisées disponibles
Modèle Spécialité	Modèle psychiatrique disponible : comfortnest blue^{MH} Housse entièrement fermée, sans poignées, sans rabats, sans fermeture éclair.
Capacité de poids	450 lb (204 kg) 950 lb (432 kg) sur le modèle comfortnest blue+
Inflammabilité	Rencontre les normes 16 CFR 1632, Cal. TB 117 Barrière optionnelle disponible : Cal. TB 129, Boston IX-11
Garantie	Garantie 5 ans non proportionnelle sur le modèle comfortnest blue et comfortnest blue+ Garantie 3 ans non proportionnelle sur le modèle comfortnest blue^{MH}