



umano medical

SÉRIE THÉRAPEUTIQUE

covernest gray^{MC}




Gestion du microclimat

PRINCIPAUX AVANTAGES

- La housse à triple couche perméable à la vapeur peut être placée sur n'importe quelle surface de redistribution de la pression non motorisée (surface en mousse ou en gel) afin d'ajouter la thérapie de faible perte d'air.
- La fonction de faible perte d'air contrôle l'humidité et l'accumulation de chaleur afin d'aider à gérer l'environnement microclimatique de la peau du patient.

THÉRAPIE

- Faible perte d'air sur demande

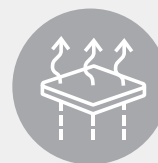

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

UNITÉ DE CONTRÔLE

Permet d'ajouter rapidement la thérapie de faible perte d'air à toute surface de redistribution de pression non motorisée

COUCHE SUPÉRIEURE

Respirante, et minimise les forces de friction et de cisaillement



COUCHE INFÉRIEURE

Étanche aux liquides pour protéger l'intérieur du matelas

COUCHE DU MILIEU

Permet une circulation d'air dégagée afin d'empêcher l'accumulation de chaleur et diminuer la macération

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions	Largeur : 91,4 cm (36")	
	Longueur : 203 cm et 213 cm (80" et 84")	
	Hauteur compatible avec des surfaces de 17,8 cm à 25,4 cm (7" à 10")	
Capacité de poids	Selon le matelas utilisé avec la housse à faible perte d'air	
Unité de contrôle	Dimensions	35 cm x 28 cm x 16,4 cm (13,8" x 11" x 6,5")
	Poids	10,2 lb (4,6 kg)
	Fiche	14' de qualité hôpital, détachable
	Alimentation Électrique	90-264 V, 50/60 Hz, 1A/0,5A, Universel
	Listé ETL	Conforme à la norme UL STD 60601-1 pour la sécurité aux risques électriques, de feux et mécaniques.
	Certifié selon	CAN/CSA STD C22.2 No. 601.1
Inflammabilité	Rencontre la norme CAL 117	

Les spécifications peuvent changer sans préavis.



Umano Medical inc.
 230, boul. Nilus-Leclerc
 L'Islet QC G0R 2C0 CANADA
 Sans frais : 1 877 247-7494
 information@umanomedical.com
 umanomedical.com

Umano Medical est distributeur de la série thérapeutique fabriquée par KAP MEDICAL