




umano medical

VISCOGEL SURFACE D'APPUI PRÉVENTIVE

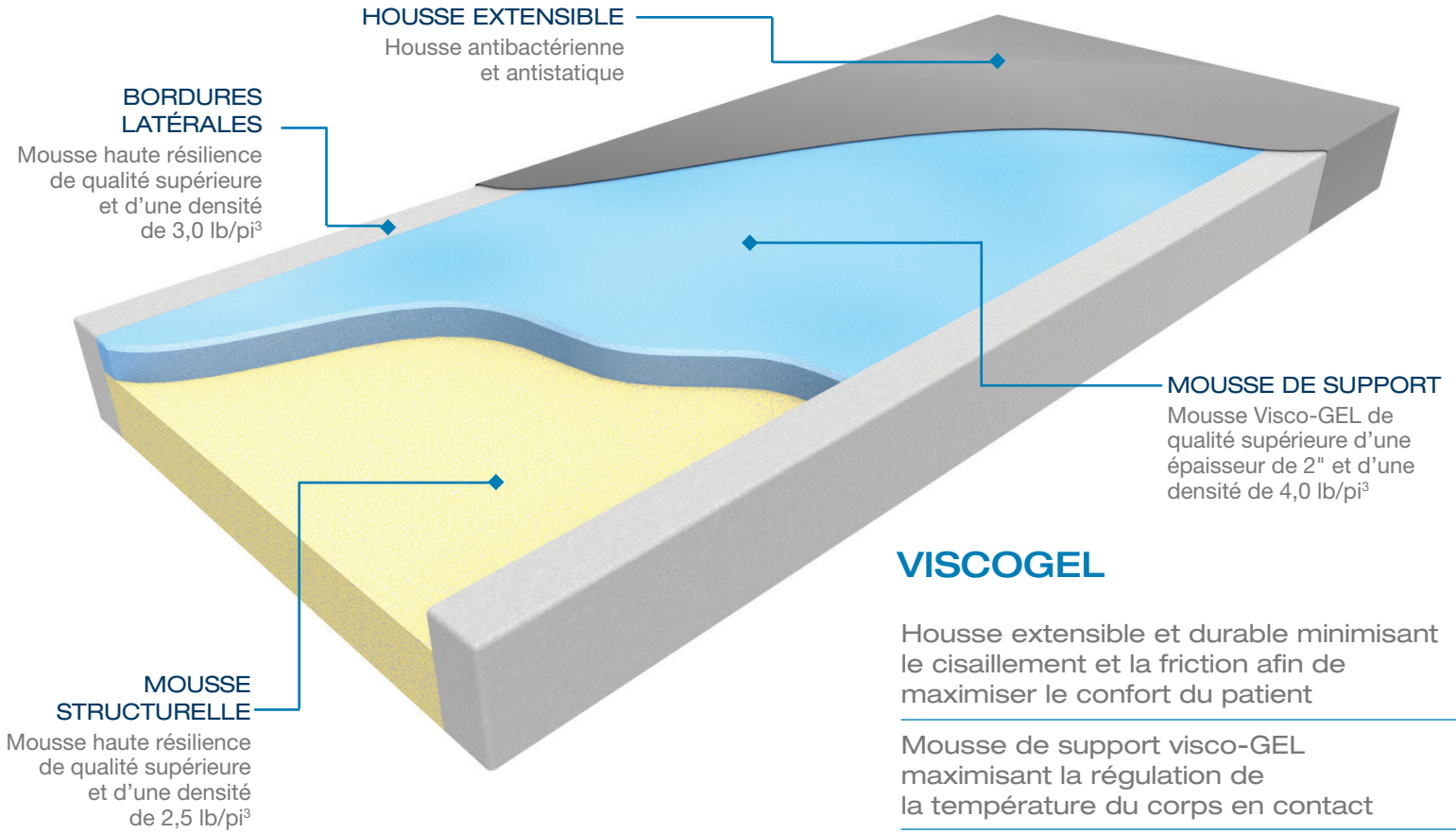


VISCOGEL

Housse extensible et durable minimisant le cisaillement et la friction afin de maximiser le confort du patient


Mousse de support visco-GEL maximisant la régulation de la température du corps en contact

Bordures latérales renforcées de mousse haute résilience maximisant la stabilité du patient et facilitant les transferts


DURABILITÉ • PERFORMANCE • CONFORT

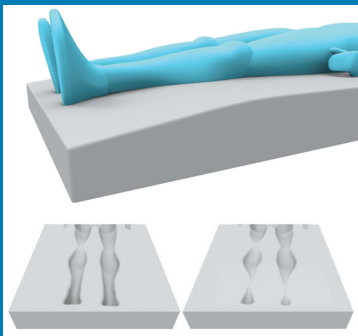


Inclinaison aux talons optionnelle afin de minimiser la pression exercée sur les membres inférieurs

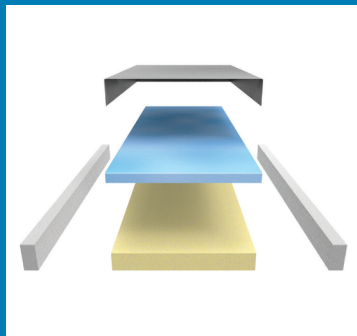

Construction multi-couches afin de maximiser le support et le confort du patient

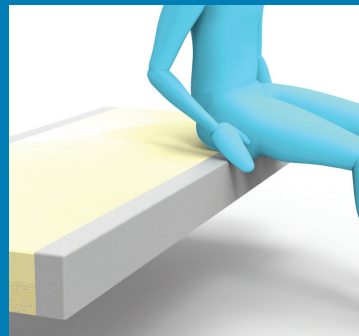

Bordures latérales renforcées minimisant les risques de chutes et facilitant les transferts

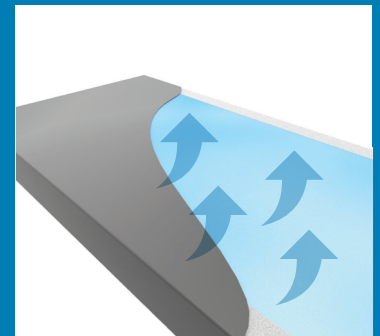

Mousse viscoélastique infusée de GEL maximisant la régulation de la température du corps en contact





umano medical

VISCOGEL
SURFACE D'APPUI
PRÉVENTIVE

Spécifications techniques

MODÈLE	VISCOGEL
Mousse de support	Visco-GEL de 2" d'épaisseur Densité de 4,0 lb/pi ³
Mousse structurelle	Mousse haute résilience de qualité supérieure Densité 2,5 lb/pi ³
Bordures latérales	Mousse haute résilience de qualité supérieure Densité 3,0 lb/pi ³
Housse extensible	Extensible dans 4 sens avec coutures internes Fermeture éclair à la tête avec rabat Antibactérienne et antistatique
Capacité maximale	350 lb / 159 kg
Inflammabilité	Testé selon la norme 16CFR 1632 / 16CFR 1633
Dimensions disponibles* *Dimensions personnalisables sur demande	91 cm (35") x 198 cm (78") x 15 cm (6") 91 cm (35") x 203 cm (80") x 15 cm (6") 91 cm (35") x 213 cm (84") x 15 cm (6")
Caractéristiques optionnelles	<ul style="list-style-type: none">• 4 poignées renforcées• Inclinaison de la surface aux talons
Choix de housse	<ul style="list-style-type: none">• Housse extensible scellée• Housse de nylon de type psychiatrique

Les matelas de cette gamme sont conçus sans latex.

Umano Medical se réserve le droit de changer les spécifications sans préavis.



Umano Medical inc.

230, boul. Nilus-Leclerc, L'Islet (Québec) G0R 2C0 CANADA
Sans frais : 1 877 247-7494
information@umanomedical.com
www.umanomedical.com